



Automatización
total mediante
consolidación

Automated Urine Sediment Analyzer

AUTION EYE

AI-4510

Fully Automated Urine Analyzer

AUTION MAX

AX-4060



Comprobación de la ventana de estado

Cada alimentador puede contener hasta 200 tiras reactivas

Limpieza de la bandeja de tiras reactivas

Ligaçõo do AUTION MAX e AUTION EYE

Automated Urine Sediment Analyzer

AUTION EYE

AI-4510

Función de dilución automática
Colección de imágenes del Atlas
imagen microscópica automática



Huella compacta
Entender el cambio de valores
Función de activación

Fully Automated Urine Analyzer

AUTION MAX

AX-4060

Menos pasos manuales

Función de dilución automática

Dilución automática de muestras muy concentradas
Reduce la intervención manual

Herramienta de formación única

Colección de imágenes del Atlas

Biblioteca de 12 categorías
Se pueden añadir imágenes nuevas e interesantes a la colección

Identificación sensorial

La imagen en pantalla se presenta como una imagen (sintético) microscópica

Las imágenes en color ayudan a identificar partículas
La pantalla de resumen permite una evaluación rápida de la frecuencia y el tamaño de las partículas

Facilidad de implementación

Tamaño compacto

AUTION EYE se puede conectar a la serie AUTION MAX (celda de trabajo inteligente)

Resultados de calidad superior


Descripción del cambio de valor

Comparación de los resultados de los análisis de química con el análisis de sedimentos (función de comprobación cruzada)
Mejora la fiabilidad de los resultados

Reduce la necesidad de pruebas adicionales

Función Gating

Los resultados del análisis de orina de AX determinarán si es necesario realizar más análisis de sedimentos
El usuario puede definir reglas de pruebas

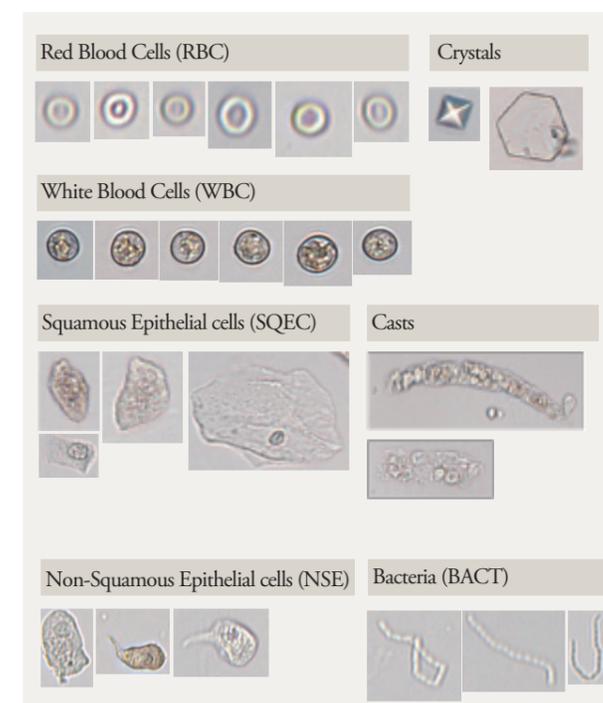


Ejemplo de imágenes de partículas

Colección de imágenes del Atlas (figuras de referencia)

Atlas incluye imágenes preinstaladas.

El usuario puede añadir sus propias imágenes a partir de los resultados de medición.

Atlas es una referencia útil como ayuda con la clasificación manual.

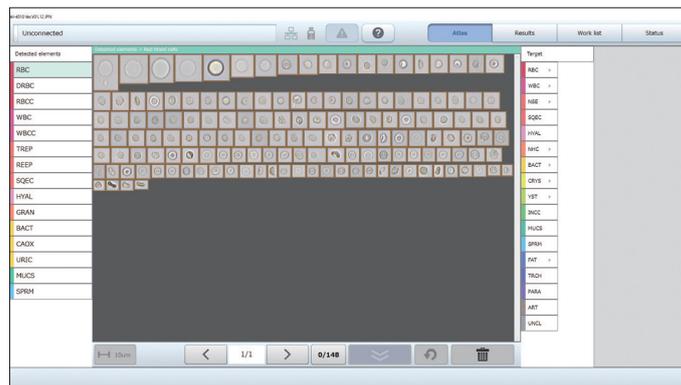


Pantalla de resumen

Las imágenes de los elementos sólidos se muestran como una imagen (sintético)microscópica.

Se resalta el elemento sólido seleccionado en la lista.

Haga clic en la rueda del ratón para la selección de imágenes

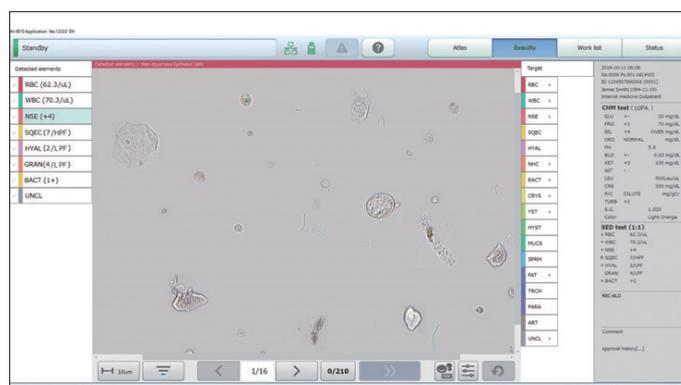

Elementos relacionados



Nuevo reactivo

Uriflet S 11UA

Las tiras Uriflet S 11UA pueden ayudarle con la detección y el diagnóstico de nefropatía diabética e IRC (insuficiencia renal crónica).

La nefropatía asintomática en su etapa inicial se puede identificar con precisión mediante la medición simultánea de microalbúmina/creatinina, lo que mejora en gran medida el pronóstico.

Nombre de tira reactiva	Elemento de medición											Elemento calculado	
	GLU	PRO	BIL	URO	pH	BLD	KET	NIT	LEU	CRE	ALB	P/C	A/C
11UA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Analizador de orina semiautomático

Aution Daten

AE-4070

Diseño compacto :
206 (An.)×365 (Pr.)×180 (Al.) mm/5,0kg

Alto rendimiento :
514 pruebas/hora (7 segundos/prueba)

Función de autoarranque :
la medición se inicia automáticamente cuando se coloca una tira en la bandeja.

La pantalla táctil permite un manejo sencillo e intuitivo.

El AE-4070 es el sucesor del Aution Eleven.

También funciona como máquina de backup para el AX-4060.

Legal manufacturer

ARKRAY FACTORY, INC.

1480 Koji Konan-cho, Koka, Shiga-ken 520-3306, JAPAN

European representative

ARKRAY EUROPE, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

<https://www.arkray.eu/english/>

ARKRAY GLOBAL BUSINESS, INC.

Yousuien-nai, 59 Gansuin-cho, Kamigyo-ku,

Kyoto 602-0008, JAPAN

TEL +81-75-662-8979 FAX +81-75-431-1202