

Imprimantă PocketChem

Manual de operare

Vă mulțumim pentru achiziționarea imprimantei PocketChem.

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Pentru mai multe detalii, consultați manualul de operare furnizat împreună cu PocketChem.

Dacă a avut loc sau este posibil să fi avut loc un incident grav legat de dispozitiv, vă rugăm să îl raportați direct producătorului sau prin intermediul reprezentantului autorizat și autorității dvs. locale de reglementare.

Scop preconizat

Imprimanta PocketChem este o imprimantă de înregistrare termică dedicată, pentru utilizare cu PocketChem BA (PA-4140) și PocketChem UA (PU-4010), destinate măsurării calitative, semi-cantitative și/sau cantitative a mai multor markeri fiziologici. Destinat exclusiv utilizării pentru diagnosticare *in vitro* și uzului profesional. Acest instrument nu este destinat utilizării pentru testare în apropierea pacientului.

Acest produs este în conformitate cu standardul CEM IEC61326-2-6:2012(EN61326-2-6:2013).

Clasa de emisie: CISPR 11 Clasa A

Acest instrument este un instrument medical IVD.



Acest produs este conform cu Regulamentul (EU) 2017/746.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă A, în conformitate cu partea a 15-a din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare atunci când echipamentul este utilizat într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență, iar dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Operarea acestui echipament într-o zonă rezidențială poate cauza interferențe dăunătoare, caz în care utilizatorul va trebui să corecteze interferențele pe cheltuiala sa.

Mediul electromagnetic trebuie evaluat înainte de utilizarea dispozitivului. Nu utilizați acest dispozitiv în apropierea unor surse de radiații electromagnetice puternice, deoarece acestea pot interfera cu buna funcționare.



Imprimanta trebuie să fie atașată direct la instrument pentru a o putea utiliza. Prin urmare, imprimanta poate fi, de asemenea, contaminată de microorganisme patogene. Aveți grijă atunci când atașați, detașați și depozitați imprimanta, pentru a preveni expunerea la microorganismele patogene.

Simboluri

Următoarele simboluri sunt utilizate în acest manual și pe etichetele de pe acest instrument, pentru a vă atrage atenția asupra unor elemente specifice.


■ Pentru siguranța dumneavoastră



Urmați instrucțiunile oferite aici, pentru a preveni expunerea la microbi patogeni.

Despachetarea

Pachetul trebuie să conțină componentele enumerate mai jos. Verificați dacă totul este inclus. Dacă lipsește ceva sau dacă ceva este deteriorat, contactați-vă distribuitorul.

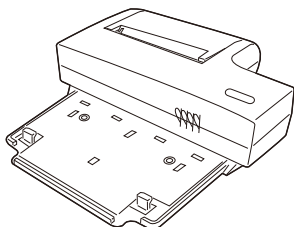

■ Imprimantă PocketChem



■ Stilou stylus
(Depozitat în imprimantă)



■ Hârtie pentru imprimantă



■ Manual de operare
(acest manual)

Materiale necesare dar nefurnizate

- PocketChem BA PA-4140
- PocketChem UA PU-4010
- Cablu de alimentare
- Adaptor c.a.

Specificațiile imprimantei

Imprimantă	Imprimantă de înregistrare termică
Hârtie pentru imprimantă	Hârtie termică cu dezvoltare colorată ridicată (l 58 mm × Ø 26 mm)
Mediu de operare	Temperatură: 10 – 35 °C; Umiditate: 25 – 85% UR
Mediu de măsurare	Temperatură: 10 – 35 °C; Umiditate: 25 – 85% UR
Mediu de depozitare	Temperatură: 1 – 35 °C; Umiditate: 20 – 85% UR (Fără condens)
Mediu în timpul transportului	Temperatură: -10 – 60 °C; Umiditate: 20 – 85% UR (Fără condens)
Dimensiuni	125 (l) × 133 (A) × 36 (H) mm
Greutate	180 g (fără hârtie pentru imprimantă)
Sursă de alimentare	Adaptor c.a. 7,5 V 3 A
Consum de putere	20 W
Atașament	Atașare cu o singură atingere
Conexiune	Contact
Durata de viață preconizată	5 ani de la prima utilizare (instalare) a instrumentului (conform datelor companiei)

Pentru utilizare

Respectați procedura de mai jos pentru a atașa/detașa imprimanta la/de la instrument.

Acest manual de operare utilizează PocketChem UA (PU-4010) ca exemplu.

Pentru mai multe detalii, consultați manualul de operare furnizat împreună cu PocketChem.


NOTĂ: Opriți alimentarea și deconectați adaptorul c.a. de la priza de curent alternativ, înainte de a atașa sau de a detașa imprimanta. În caz contrar, instrumentul și imprimanta pot fi deteriorate. Imprimanta poate imprima fără sens dacă este atașată sau detașată accidental în timp ce este conectată la priza de curent alternativ. Totuși, acest lucru nu înseamnă că este ceva în neregulă cu imprimanta.

■ Cum se atașează

NOTĂ: Imprimanta funcționează numai cu energie de curent alternativ, nu și cu baterii.


După ce imprimanta este atașată la instrument, conectați instrumentul prin intermediul imprimantei la o priză de curent alternativ.

1. Așezați instrumentul pe imprimantă oblic, așa cum se arată în figură.
2. Apăsați partea superioară a instrumentului pentru a-l fixa pe poziție.
3. Asigurați-vă că partea superioară a instrumentului și a imprimantei sunt aliniate pe orizontală una cu cealaltă și că ambele unități sunt bine fixate una de cealaltă.

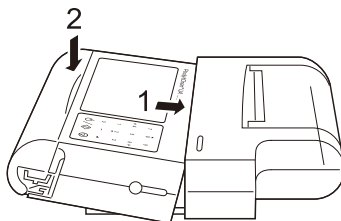

■ Cum se detașează

1. Așezați instrumentul pe o suprafață plană (cum ar fi un birou).
2. În timp ce apăsați pe carcasa de deasupra afișajului într-un punct aliniat cu centrul afișajului (a), ridicați capacul unității de citire, din partea de jos (b).

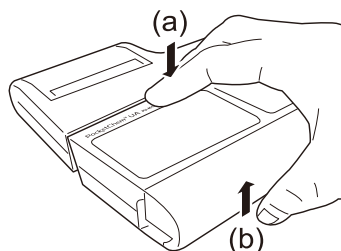

ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Dacă aveți nevoie de asistență tehnică, contactați
ARKRAY Europe, B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

