

Centrifuge Cup (for D-Concept)

Lue laitteen käyttöohje ennen käyttöä. Jos sinulla on ollut tai olisi voinut olla laitteeseen liittyvä vakava vaaratilanne, ilmoita siitä suoraan valmistajalle, valtuutetulle edustajalle tai paikalliselle säädäntöviranomaiselle.

Käyttötarkoitus

Centrifuge Cup (for D-Concept) on kokoverelle tarkoitettu näytesäiliö, joka on suunniteltu käytettäväksi useiden fysiologisten merkkien kvantitatiiviseen mittaukseen tarkoitettujen SPOTCHEM D-Concept (SD-4820)- ja SpotChem D-Concept 2c (SD-4830) -laitteiden kanssa. Vain *in vitro* -diagnoosikäyttöön ja ammatilliseen käyttöön.

Varoitukset ja varo-ohjeet


- Vain *in vitro* -diagnoosikäyttöön.
- Noudata erityistä huolellisuutta, kun käsittelet kliinisiä näytteitä ja analyysityökaluja. Hävitä biologisesti vaaralliset jätteet asianmukaisesti. Katso tarkat ohjeet laitteen käyttöohjeista.
- Älä käytä uudelleen.

Tuotteen kuvaus

Tämä näyteputki sisältää hepariinia, joka toimii antikoagulanttina, ja näyteputkea käytetään plasman erottamiseen kokoverestä.

Käyttöohjeet

- Kaada 495 µl – 565 µl vasta otettua kokoverta näyteputkeen.
- Aseta korkki tiukasti paikalleen ja sekoita kääntämällä varovasti 5–6 kertaa.
- Irrota korkki ja aseta näyteputki välittömästi laitteen sisäiseen sentrifugiin mittausta varten.

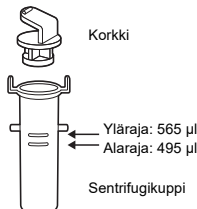

Varotoimet

- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten kertakäyttöhansikkaita näytteitä käsiteltäessä.
- Avaa korkki varovasti ja varo, ettei näyteputken sisäpinnan kidepinnoitetta irtoa. Kiteet ovat antikoagulanttina käytettyä litiumhepariinia.
- Älä käytä korkittomia näyteputkia. Älä käytä näyteputkea, jos korkki tai sentrifugikuppi on vaurioitunut.
- Säilytä pimeässä, kuivassa ja suojassa suoralta auringonvalolta.
- Näyteputki ei ole steriili.
- Näyteputkea ei ole tarkoitettu näytteiden säilyttämiseen.
- Älä käytä tätä näyteputkea sellaisen kokoveren mittaamiseen, joka on kerätty antikoagulanttia sisältäviin näyteputkiin.

Säilytys ja säilyvyys

Säilytä 2–30 °C:n (36–86 °F) lämpötilassa. Näyteputkia voi käyttää pakkaukseen merkittyyn voimassaolopäivään asti.

Mukana toimitetut materiaalit

Mukana toimitetaan seuraava määrä seuraavia tuotteita.

- Centrifuge Cup (for D-Concept): 100 kpl
- 100 sentrifugikuppia
- 100 korkkia

Tarvittavat materiaalit, joita ei toimiteta mukana

Mittaukseen tarvitaan myös muita kulutustarvikkeita. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Jos tarvitset teknistä tukea, ota yhteys
ARKRAY Europe, B.V. -yhtiöön.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

