

Centrifuge Cup (for D-Concept)

Prieš naudojimą perskaitykite prietaiso naudojimo vadovą. Jei patyrėte arba galėjote patirti su prietaisu susijusį rimtą incidentą, praneškite apie tai tiesiogiai gamintojui arba per įgaliotąjį atstovą ir vietos reguliavimo institucijai.

Numatytoji paskirtis

„Centrifuge Cup (for D-Concept)“ yra speciali viso kraujo mėginių talpykla, skirta naudoti su „SPOTCHEM D-Concept“ (SD-4820) ir „SpotChem D-Concept 2c“ (SD-4830), skirtais kiekybiniam kelių fiziologinių žymenų matavimui atlikti. Skirta tik *in vitro* diagnostikai ir profesionalams.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės


- Skirta tik *in vitro* diagnostikai.
- Būkite ypač atsargūs tvarkydami klinišnius mėginius ir analitines priemones. Tinkamai utilizuokite biologinį pavojų keliančias atliekas. Išsamias instrukcijas rasite prietaiso naudojimo vadove.
- Negalima naudoti pakartotinai.

Gaminio aprašymas

Šiame mėgintuvėlyje kaip antikoagulianto yra heparino, jis naudojamas plazmai atskirti nuo viso kraujo.

Nurodymai

1. Supilkite 495–565 µL šviežiai surinkto viso kraujo į mėgintuvėlį.
2. Sandariai uždarykite ir švelniai apverskite 5–6 kartus, kad sumaišytumėte.
3. Nuimkite dangtelį ir nedelsdami įdėkite mėgintuvėlį į prietaiso vidinę centrifugą matavimui atlikti.

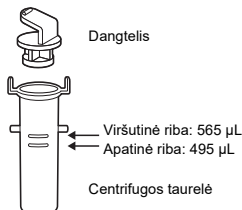

Perspėjimai

1. Prieš tvarkydami mėginius, užsidėkite tinkamas apsaugines priemones, pvz., vienkartinę pirštines.
2. Švelniai atidarykite dangtelį, stengdamiesi neišbarstyti kristalų, dengiančių vidinį mėgintuvėlio paviršių. Jie yra ličio heparinas, naudojamas kaip antikoaguliantas.
3. Nenaudokite mėgintuvėlių, kurie nėra uždengti dangteliu. Nenaudokite mėgintuvėlio, jei dangtelis ar centrifugos taurė yra pažeisti.
4. Laikykite tamsioje vietoje, apsaugotoje nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
5. Mėgintuvėlis nėra sterilizuotas.
6. Mėgintuvėlis nėra skirtas mėginiams laikyti.
7. Nenaudokite šio mėgintuvėlio visam kraujui, surinktam mėgintuvėliuose su antikoaguliantu, matuoti.

Laikymas ir stabilumas

Laikykite 2–30 °C (36–86 °F) temperatūroje.

Mėgintuvėlius galima naudoti iki ant pakuotės nurodytos galiojimo pabaigos datos.

Pateiktos medžiagos

Šie elementai pateikiami toliau nurodytais kiekiais.

- Centrifuge Cup (for D-Concept): 100 vnt.
100 centrifugos taurelių
100 dangtelių

Reikalingos, bet nepridedamos medžiagos

Matuojant taip pat reikalingos kitos sunaudojamos medžiagos. Išsamesnės informacijos rasite prietaiso naudojimo vadove.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Jei reikia techninės pagalbos, kreipkitės į

ARKRAY Europe, B.V.

TEL: +31-20-545-24-50

FAX: +31-20-545-24-59

