

Centrifuge Cup (for D-Concept)

Citiți manualul de utilizare pentru instrument, înainte de utilizare. Dacă a avut loc sau este posibil să fi avut loc un incident grav legat de dispozitiv, vă rugăm să îl raportați direct producătorului sau prin intermediul reprezentantului autorizat și autorității dvs. locale de reglementare.

Scop preconizat

Centrifuge Cup (for D-Concept) este un recipient dedicat pentru probe de sânge integral care se utilizează cu SPOTCHEM D-Concept (SD-4820) și SpotChem D-Concept 2c (SD-4830), conceput pentru măsurarea cantitativă a mai multor markeri fiziologici. Numai pentru diagnosticare *in vitro* și uz profesional.

Avertismente și precauții


- Numai pentru diagnosticare *in vitro*.
- Aveți extrem de multă grijă la manipularea probelor clinice și a instrumentelor de analiză. Eliminați în mod corespunzător deșeurile biologice periculoase. Pentru instrucțiuni detaliate, consultați manualul de utilizare al instrumentului.
- Nu reutilizați.

Descrierea produsului

Această eprubetă pentru probă conține heparină folosită ca anticoagulant și este folosită pentru a separa plasma din sângele integral.

Instrucțiuni

1. Turnați 495 μ L - 565 μ L de sânge integral proaspăt colectat în eprubeta pentru probă.
2. Puneți capacul înapoi și strângeți, apoi amestecați, răsturnând eprubeta ușor de 5 până la 6 ori.
3. Pentru măsurare, scoateți capacul și puneți imediat eprubeta pentru probă în centrifuga internă a instrumentului.

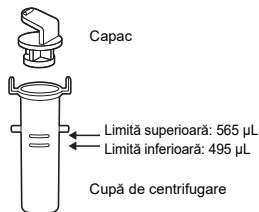

Atenție

1. Înainte de a manipula probele, purtați echipament de protecție adecvat, de ex., mănuși de unică folosință.
2. Deschideți ușor capacul, având grijă să nu răspândiți cristalele care acoperă suprafața interioară a eprubetei pentru probă. Acestea sunt heparină de litiu, folosită ca anticoagulant.
3. Nu folosiți eprubetele pentru probă fără capac. Nu folosiți eprubeta pentru probă în cazul în care capacul sau cupa de centrifugare sunt deteriorate.
4. Depozitați într-un loc întunecat, evitând umiditatea și lumina directă a soarelui.
5. Eprubeta pentru probă nu este sterilizată.
6. Eprubeta pentru probă nu este concepută pentru depozitarea specimenelor.
7. Nu folosiți această eprubetă pentru probă pentru a măsura sângele integral colectat în eprubete pentru probă care conțin anticoagulant.

Depozitare și stabilitate

Depozitați la 2 - 30 $^{\circ}$ C (36 - 86 $^{\circ}$ F)

Eprubetele pentru probă pot fi utilizate până la data expirării imprimată pe ambalaj.

Materiale furnizate

Următoarele materiale sunt furnizate în următoarele cantități.

- Centrifuge Cup (for D-Concept): 100 buc.
100 cupe de centrifugare
100 capace

Materiale necesare, care nu sunt furnizate

Măsurarea necesită și alte materiale consumabile. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al instrumentului.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Dacă aveți nevoie de asistență tehnică,

contactați ARKRAY Europe, B.V.

TEL: +31-20-545-24-50

FAX: +31-20-545-24-59

