

Centrifuge Cup (for D-Concept)

Pred uporabo instrumenta preberite uporabniški priročnik. Če je prišlo ali bi lahko prišlo do resnega zapleta, povezanega s pripomočkom, o tem obvestite neposredno izdelovalca ali pooblaščenega zastopnika in lokalni regulativni organ.

Namen uporabe

Centrifuge Cup (for D-Concept) je namenski vsebnik za vzorce polne krvi za uporabo s SPOTCHEM D-Concept (SD-4820) in SpotChem D-Concept 2c (SD-4830), ki je namenjen kvantitativni meritvi več fizioloških označevalcev. Samo za *in vitro* diagnostično in profesionalno uporabo.

Opozorila in previdnostni ukrepi


- Samo za *in vitro* za diagnostično uporabo.
- Bodite posebej previdni pri ravnanju s kliničnimi vzorci in analitičnimi orodji. Biološko nevarne odpadke ustrezno zavrzite. Za podrobna navodila glejte uporabniški priročnik instrumenta.
- Ne uporabljajte ponovno.

Opis izdelka

Ta epruveta za vzorec vsebuje heparin kot antikoagulant in se uporablja za ločevanje plazme od polne krvi.

Navodila

1. V epruveto za vzorec nalijte 495 μ L - 565 μ L sveže odvzete polne krvi.
2. Trdno zaprite pokrovček in nežno obrnite 5 do 6-krat, da premešate.
3. Odstranite pokrovček in takoj postavite epruveto za vzorec v notranjo centrifugo instrumenta za meritve.

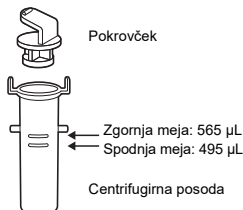

Previdnostni ukrepi

1. Pred ravnanjem z vzorci nosite ustrezno zaščitno opremo, kot so zaščitne rokavice za enkratno uporabo.
2. Nežno odprite pokrovček, pri tem pazite, da ne razpršite kristalov, ki prekrivajo notranjo površino epruvete za vzorec. To je litijev heparin, ki se uporablja kot antikoagulant.
3. Ne uporabljajte epruvet za vzorec, ki niso zaprte s pokrovčkom. Ne uporabljajte epruvete za vzorec, če je pokrovček ali centrifugirna posoda poškodovana.
4. Shranite na temnem mestu, izogibajte se vlagi in neposredni sončni svetlobi.
5. Epruveta za vzorec ni sterilizirana.
6. Epruveta za vzorec ni namenjena shranjevanju vzorcev.
7. Ne uporabljajte te epruvete za vzorec za meritve polne krvi, zbrane v epruvetah za vzorec, ki vsebujejo antikoagulant.

Shranjevanje in stabilnost

Shranjujte pri 2-30 °C (36-86 °F)

Epruvete za vzorec se lahko uporabljajo do datuma izteka roka uporabnosti, navedenega na embalaži.

Priloženi materiali

Naslednji predmeti so priloženi v naslednjih količinah.

- Centrifuge Cup (for D-Concept): 100 kosov
- 100 centrifugirnih posod
- 100 pokrovčkov

Potrebni materiali, ki niso priloženi

Meritev zahteva tudi druge potrošne materiale. Za podrobnosti glejte uporabniški priročnik instrumenta.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Če potrebujete tehnično pomoč, se obrnite na

ARKRAY Europe, B.V.

TEL: +31-20-545-24-50

FAX: +31-20-545-24-59

