

Centrifuge Cup (for D-Concept)

Läs bruksanvisningen för instrumentet före användning. Om du har varit med om eller hade kunnat vara med om ett allvarligt tillbud i samband med enheten ska detta rapporteras direkt till tillverkaren eller via det auktoriserade representanten och till den lokala tillsynsmyndigheten.

Avsedd användning

Centrifuge Cup (for D-Concept) är en särskild behållare för helblodsprov för användning med SPOTCHEM D-Concept (SD-4820) och SpotChem D-Concept 2c (SD-4830), som är avsedd för kvantitativ mätning av flera fysiologiska markörer. Endast för *in vitro*-diagnostisk och professionell användning.

Varningar och försiktighetsåtgärder


- Endast för *in vitro*-diagnostisk användning.
- Var extra försiktig vid hantering av kliniska prover och analysverktyg. Kassera biofarligt avfall på rätt sätt. Detaljerade instruktioner finns i bruksanvisningen för instrumentet.
- Får inte återanvändas.

Produktbeskrivning

Detta provrör innehåller heparin som antikoagulant och används för att separera plasma från helblod.

Anvisningar

1. Häll 495 µL–565 µL av det nydragna helblodet i provröret.
2. Fäst locket ordentligt och vänd försiktigt 5 till 6 gånger för att blanda det.
3. Ta av locket och ställ omedelbart in provröret i instrumentets interna centrifug för mätning.

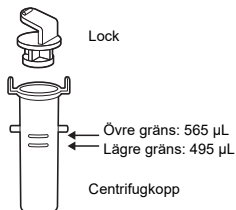

Försiktighetsåtgärder

1. Använd lämplig skyddsutrustning, som engångshandskar, när du hanterar proverna.
2. Öppna försiktigt locket och se till att inte sprida kristallerna som täcker provrörets inre yta. De består av litiumheparin som används som antikoagulantia.
3. Använd inte provrör som inte har lock. Använd inte provröret om locket eller centrifugkoppen är skadad.
4. Förvara på en mörk plats som inte är utsatt för fukt eller direkt solljus.
5. Provröret är inte steriliserat.
6. Provröret är inte avsett för förvaring av prover.
7. Använd inte detta provrör för att mäta helblod som samlats in i provrör som innehåller antikoaguleringsmedel.

Lagring och stabilitet

Förvaras i 2–30 °C (36–86 °F)

Provrören kan användas fram till det utgångsdatum som anges på förpackningen.

Medföljande material

Följande artiklar medföljer i följande kvantiteter.

- Centrifuge Cup (for D-Concept): 100 st
100 centrifugkoppar
100 lock

Material som krävs men inte medföljer

Mätningen kräver även andra förbrukningsvaror. Mer information finns i bruksanvisningen för instrumentet.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Kontakta ARKRAY Europe, B.V. om du behöver teknisk hjälp.

TEL: +31-20-545-24-50

FAX: +31-20-545-24-59

