

Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ)

Před použitím si přečtěte návod k obsluze přístroje. Pokud došlo nebo mohlo dojít k vážné nehodě související s tímto prostředkem, nahlaste to přímo nebo prostřednictvím autorizovaného zástupce výrobci a místnímu regulačnímu úřadu.

Určený účel

Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ) je vyhrazená nádoba na vzorky plné krve k použití se systémem SPOTCHEM EZ (SP-4430), který je určen pro kvantitativní měření několika fyziologických markerů. Pouze pro diagnostické použití *in vitro* a odborné použití.

Výstrahy a předběžná opatření


- Pouze pro diagnostické použití *in vitro*.
- Při manipulaci s klinickými vzorky a analytickými nástroji postupujte zvláště opatrně. Biologický nebezpečný odpad řádně zlikvidujte. Podrobné pokyny jsou uvedeny v návodu k obsluze přístroje.
- Nepoužívat opakovaně.

Popis produktu

Tato zkumavka na vzorky obsahuje heparin jako antikoagulant a používá se k separaci plazmy z plné krve.

Pokyny

1. Nalijte 250 μ l čerstvě odebrané plné krve do zkumavky na vzorky.
2. Pevně nasadte krytku a smíchejte jemným otáčením 5 až 6krát.
3. Sejměte krytku a okamžitě nasadte zkumavku na vzorky do vnitřní odstředivky přístroje za účelem měření.

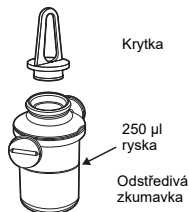

Pozor

1. Před manipulací se vzorky používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou jednorázové rukavice.
2. Opatrně otevírejte krytku, přitom dbejte na to, aby se nevysypaly krystaly pokrývající vnitřní povrch zkumavky na vzorky. Jde o lité heparin používaný jako antikoagulant.
3. Nepoužívejte zkumavky na vzorky, které nejsou uzavřené krytkou. Zkumavku na vzorky nepoužívejte, pokud je krytka nebo odstředivá zkumavka poškozená.
4. Skladujte na tmavém místě, aby se zamezilo působení vlhkosti a přímého slunečního světla.
5. Zkumavka na vzorky není sterilizovaná.
6. Zkumavka na vzorky není určena ke skladování vzorků.
7. Tuto zkumavku na vzorky nepoužívejte k měření plné krve odebrané do zkumavek na vzorky obsahujících antikoagulant jiný, než heparin.

Skladování a stabilita

Składujte při teplotě 2 - 30°C (36 - 86°F)
Zkumavky na vzorky lze používat až do data expirace uvedeného na obalu.

Poskytnuté materiály

Následující položky jsou poskytnuty v následujících množstvích.

- Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ): 100 ks
100 odstředivých zkumavek
100 krytek

Materiály nutné, ale neposkytnuté

Měření vyžaduje také jiné spotřební materiály. Podrobné informace jsou uvedeny v návodu k obsluze přístroje.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Pokud potřebujete technickou podporu,
kontaktujte ARKRAY Europe, B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

