

Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ)

Prieš naudodami perskaitykite prietaiso naudojimo vadovą. Jei patyrėte arba galėjote patirti su prietaisu susijusį rimtą incidentą, praneškite apie tai tiesiogiai gamintojui arba per įgaliotąjį atstovą ir vietos reguliavimo institucijai.

Numatyta paskirtis

Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ) yra speciali kraujo mėginių talpyklė, skirta naudoti su SPOTCHEM EZ (SP-4430), kelių fiziologinių žymenų kiekybiniam tyrimui. Tik *in vitro* diagnostikai ir naudoti specialistams.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės


- Tik *in vitro* diagnostikai.
- Būkite ypač atsargūs tvarkydami klininius mėginius ir analizės priemonės. Tinkamai utilizuokite biologiškai pavojingas atliekas. Išsamias instrukcijas rasite instrumento naudojimo vadove.
- Nenaudokite pakartotinai.

Gaminio aprašymas

Šiame mėgintuvėlyje yra heparino (antikoagulianto), kuris naudojamas plazmai atskirti nuo visos sudėties kraujo.

Nurodymai

1. Į mėgintuvėlį įpilkite 250 µl ką tik paimto visos sudėties kraujo.
2. Sandariai uždenkite ir švelniai pavartykite 5 iki 6 kartus, kad susimaišytų.
3. Nuimkite dangtelį ir nedelsdami įdėkite mėginio mėgintuvėlį į įrenginio vidinę centrifugą iširti.

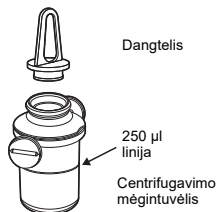

Įspėjimai

1. Prieš tvarkydami mėginius, dėvėkite tinkamas apsaugines priemones, pvz., vienkartines pirštines.
2. Švelniai atidarykite dangtelį, stengdamiesi, kad neišsisklaidytų kristalai, dengiantys vidinį mėginio mėgintuvėlio paviršių. Jie yra ličio heparinas, naudojamas kaip antikoagulantas.
3. Nenaudokite neuždengtų mėgintuvėlių. Jei dangtelis arba centrifugavimo mėgintuvėlis yra pažeisti, mėgintuvėlio nenaudokite.
4. Laikyti tamsioje vietoje, saugant nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
5. Mėginio mėgintuvėlis nėra sterilizuotas.
6. Mėginio mėgintuvėlis nėra skirtas mėginiams laikyti.
7. Nenaudokite šio mėgintuvėlio visos sudėties kraujui, surinktam mėgintuvėliuose, kuriuose yra antikoagulantų (išskyrus hepariną), tirti.

Sandėliavimas ir stabilumas

Laikyti 2-30°C (36-86°F) temperatūroje
Mėginių mėgintuvėliai gali būti naudojami iki galiojimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Komplekte esančios medžiagos

Komplekte yra toliau nurodyti šių elementų kiekiai.

- Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ): 100 vnt.
100 centrifugavimo mėgintuvėlių
100 dangtelių

Reikalingos medžiagos, kurių nėra komplekte

Tiriant reikia ir kitų vartojamųjų reikmenų. Išsamesnės informacijos ieškokite įrenginio naudojimo vadove.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Jei reikia techninės pagalbos, kreipkitės į

ARKRAY Europe, B.V.

TEL:+31-20-545-24-50

FAX:+31-20-545-24-59

