

Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ)

Citiți manualul de utilizare al instrumentului înainte de utilizare. Dacă a avut loc sau este posibil să fi avut loc un incident grav legat de dispozitiv, vă rugăm să îl raportați direct producătorului sau prin intermediul reprezentantului autorizat și autorității dvs. locale de reglementare.

Scop propus

Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ) este un recipient dedicat pentru mostre de sânge integral pentru utilizarea cu SPOTCHEM EZ (SP-4430), care este destinat măsurării cantitative a mai multor markeri fiziologici. Instrument exclusiv pentru diagnostic *in vitro* și pentru uz profesional.

Avertismente și precauții


- Instrument exclusiv pentru diagnostic *in vitro*.
- Aveți grijă sporită atunci când manevrați mostrele clinice și instrumentele analitice. Eliminați în mod corespunzător deșeurile biologice periculoase. Pentru instrucțiuni detaliate, consultați manualul de utilizare al instrumentului.
- Nu reutilizați.

Descrierea produsului

Acest tub de prelevare a mostrelor conține heparină ca anticoagulant și este utilizat pentru a separa plasma de sângele integral.

Instrucțiuni

- Turnați 250 μ L de sânge integral proaspăt recoltat în tubul de prelevare a mostrelor.
- Strângeți bine capacul și răsturnați ușor tubul de 5 până la 6 ori pentru a amesteca.
- Scoateți capacul și puneți imediat tubul de prelevare a mostrelor în centrifuga internă a instrumentului pentru măsurare.

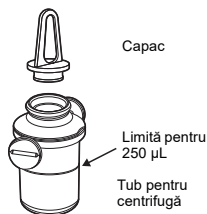

Atenționări

- Înainte de a manipula mostrele, purtați echipament de protecție adecvat, cum ar fi mănuși de unică folosință.
- Deschideți ușor capacul, având grijă să nu împrăștiati cristalele care acoperă suprafața interioară a tubului de prelevare a mostrelor. Acestea sunt cristale de heparină de litiu folosite ca anticoagulant.
- Nu utilizați tuburi de prelevare a mostrelor care nu sunt acoperite cu capac. Nu utilizați tubul de prelevare a mostrelor în cazul în care capacul sau tubul pentru centrifugă este deteriorat.
- A se păstra într-un loc întunecat, ferit de umiditate și de lumina directă a soarelui.
- Tubul de prelevare a mostrelor nu este sterilizat.
- Tubul de prelevare a mostrelor nu este destinat depozitării probelor.
- Nu utilizați acest tub de prelevare a mostrelor pentru a măsura sângele integral recoltat în tuburi de prelevare a mostrelor care conțin alți anticoagulanți decât heparina.

Depozitare și stabilitate

A se păstra la temperaturi cuprinse între 2 și 30°C (36 - 86°F). Tuburile de prelevare a mostrelor pot fi utilizate până la data de expirare indicată pe ambalaj.

Materiale furnizate

Următoarele articole sunt furnizate în următoarele cantități.

- Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ): 100 de bucăți
100 de tuburi pentru centrifugă
100 de capace

Materiale necesare, dar nefurnizate

Măsurarea necesită și alte consumabile. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al instrumentului.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Dacă aveți nevoie de asistență tehnică,

contactați ARKRAY Europe, B.V.

TEL: +31-20-545-24-50

FAX: +31-20-545-24-59

