

Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ)

Läs instrumentets driftsmanual innan användning. Om du har varit med om eller hade kunnat vara med om ett allvarligt tillbud i samband med enheten ska detta rapporteras direkt till tillverkaren eller via det auktoriserade representanten och till den lokala tillsynsmyndigheten.

Avsett ändamål

Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ) är en särskild provbehållare för helblod för användning med SPOTCHEM EZ (SP-4430) som är avsedd för kvantitativ mätning av flera fysiologiska markörer. Endast för användning vid *in vitro*-diagnostik och professionell användning.

Varningar och försiktighetsåtgärder


- Endast för användning vid *in vitro*-diagnostik.
- Var extra noggrann vid hantering av kliniska prover och analytiska verktyg. Avlägsna farligt biologisk avfall ordentligt. För detaljerade instruktioner, se instrumentets driftsmanual.
- Återanvänd inte.

Produktbeskrivning

Detta provrör innehåller heparin som en antikoagulant och används för att separera plasma från helblod.

Instruktioner

1. Häll 250 µL av det nyligen insamlade helblodet i provröret.
2. Sätt på locket ordentligt och invertera försiktigt 5 till 6 gånger för att blanda.
3. Ta bort locket och placera genast provröret i instrumentets interna centrifug för mätning.

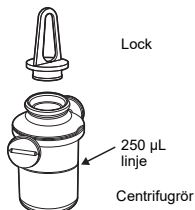

Försiktighetsåtgärder

1. Använd lämplig skyddsutrustning som till exempel engångshandskar innan hantering av prover.
2. Öppna försiktigt locket och se till att inte sprida ut kristallerna som täcker provrörets insida. De är litium-heparin och används som antikoagulanter.
3. Använd inte provrör som saknar lock. Använd inte provröret om locket eller centrifugröret är skadat.
4. Förvara på en mörk plats som inte utsätts för fukt eller direkt solljus.
5. Provröret är inte steriliserat.
6. Provröret är inte avsett för lagring av prover.
7. Använd inte detta provrör för att mäta helblod insamlat i provrör som innehåller antikoagulanter förutom heparin.

Lagring och stabilitet

Lagra vid 2 - 30°C (36 - 86°F)

Provrör kan användas fram till utgångsdatumet som visas på förpackningen.

Material som tillhandahålls

Följande saker tillhandahålls i följande mängder.

- Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ): 100 st
100 centrifugrör
100 lock

Material som krävs men som inte tillhandahålls

Mätning kräver också andra förbrukningsartiklar. För detaljer, se instrumentets driftsmanual.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Kontakta ARKRAY Europe, B.V. om du behöver teknisk hjälp.

TEL: +31-20-545-24-50

FAX: +31-20-545-24-59

