



# Solución de problemas, evolución de ADAMS

Automatic Glycohemoglobin Analyzer

## ADAMS A1c

HA-8190V



Automatic Glycohemoglobin Analyzer


# ADAMS A1c

## HA-8190V

Diseño compacto

Tecnología HPLC

Función de cambio de modo automático

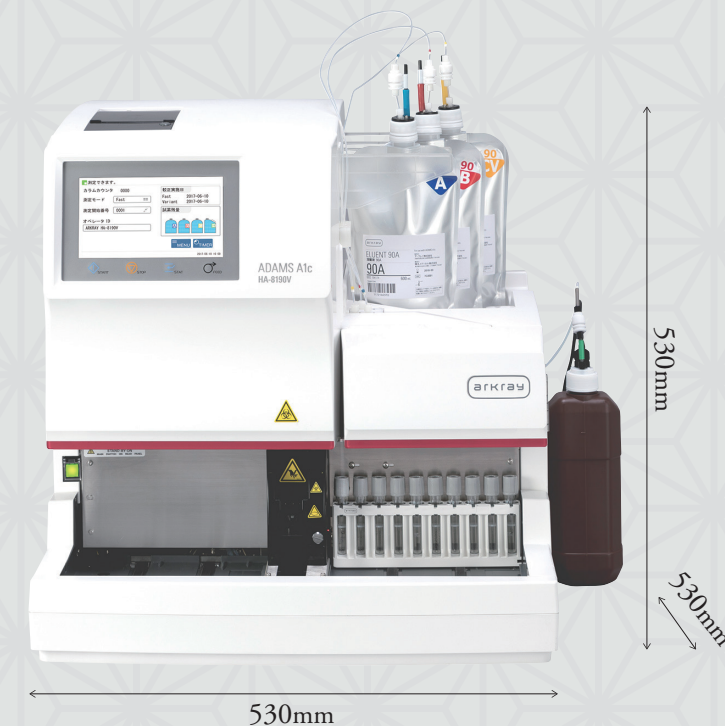

## Precisión

### Tecnología HPLC

La tecnología de HPLC proporciona resultados muy precisos

## Velocidad

### El modo Fast

mede una muestra en 24 segundos y el

### Modo Variant

en 58 segundos

## Flexibilidad

Modos de medición intercambiables  
continuos Fast ⇌ Variant

## Los cromatogramas nos dan una 'perspectiva'

### Reducción de interferencias de modificaciones y variantes de Hbs

HbS

HbC

HbA1c inestable

Hemoglobina modificada

(cianato de sodio, acetaldehído)

## Fácil de usar

### LCD color

### Racks multifuncionales

## Eficiencia


### Rotación del tubo

Colocación automática de tubos con  
códigos de barras


Mezcla automática de muestras



Rotación del tubo

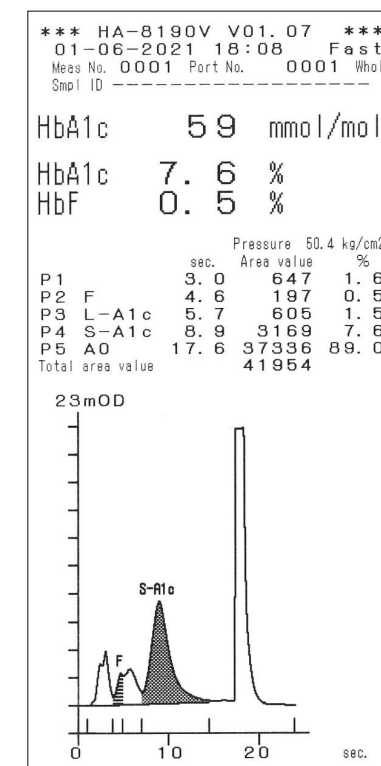

El modo Fast

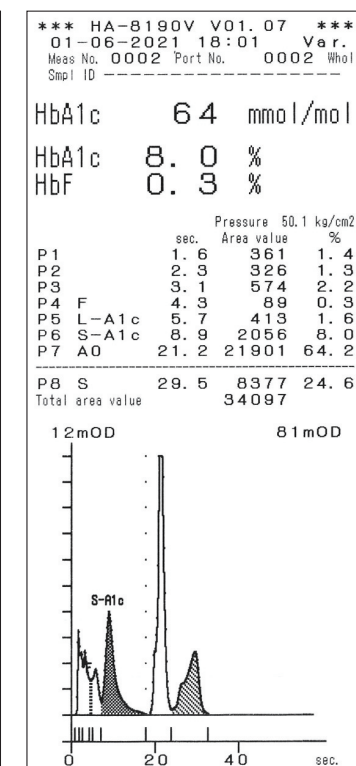

Modo Variant

|                                      | HA-8180V<br>(Previous model)                                             | HA-8190V                                                                                                                                                                                                                                                                  | Description                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muestra hemolizada<br>o sangre total | Modo Fast: 48 segundos<br>Modo Variant: 90 segundos                      | <b>Modo Fast: 24 segundos</b><br><b>Modo Variant: 58 segundos</b>                                                                                                                                                                                                         | 24 segundos más rápido<br>32 segundos más rápido                                                                                                                                                                                          |
| Detección de variantes de Hb         | HbS, HbC                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Detección de variantes principales                                                                                                                                                                                                        |
| Características                      | Sistema de modo dual<br><br>Rotación del tubo de muestra Rack de anemias | Sistema de modo dual<br><br><b>Cambio automático entre modos durante funcionamiento estándar</b><br><br>Rotación del tubo de muestra Rack de anemias<br><br><b>Lectura sencilla de códigos de barras</b><br><br><b>Pantalla táctil</b><br><br><b>Gestión del operador</b> | Modo de medición<br><br>Mezcla automática de sangre<br>Muestras de nivel bajo de Hb<br>Rotación automática del tubo de muestra para la detección de códigos de barras<br>Funcionamiento intuitivo<br>Varios niveles de acceso del usuario |

## Producto relacionado



\*Los diseños y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

## Material de control de calidad de HbA1c exclusivo extendSURE CONTROL

Dos niveles de controles liofilizados, en viales de vidrio con tapón de rosca.

Tiene un volumen reconstituido de 0,25 mL con una concentración total de hemoglobina de 14 g/dL.

Estos controles figuran en las listas de la US FDA e incluyen la marca CE.

### Legal manufacturer

**arkray factory, inc.**

1480 Koji Konan-cho, Koka, Shiga-ken 520-3306, JAPAN

### European representative

**arkray europe, b.v.**

Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

<https://www.arkray.eu/english/>

### arkray global business, inc.

Yousuien-nai, 59 Gansuin-cho, Kamigyo-ku,

Kyoto 602-0008, JAPAN

TEL +81-75-662-8979 FAX +81-75-431-1202