

arkray



Risolvere i problemi,
l'evoluzione di
ADAMS

Automatic Glycohemoglobin Analyzer

ADAMS A1c
HA-8190V

arkray, inc.




Automatic Glycohemoglobin Analyzer

ADAMS A1c HA-8190V

Design compatto

Tecnologia HPLC

Funzione di cambio automatico
della modalità

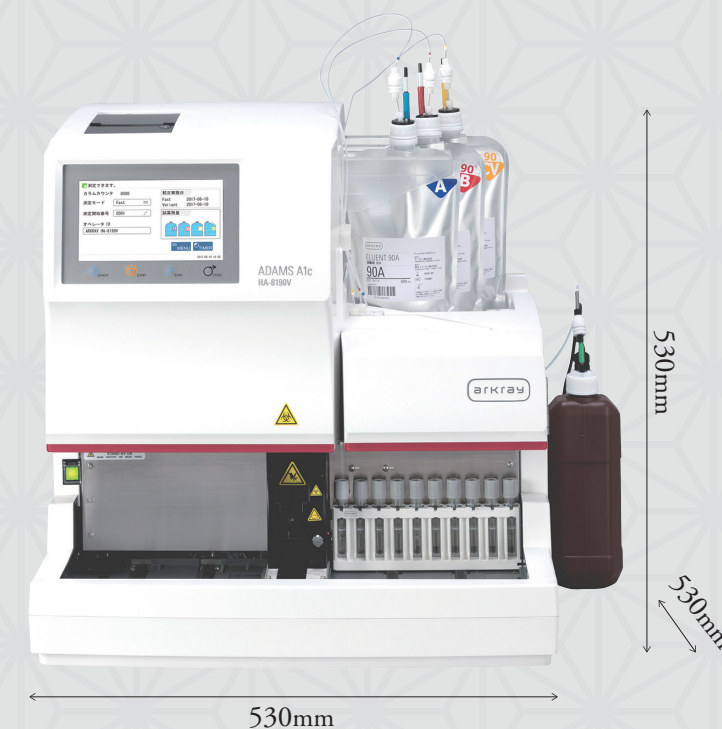

Precisione

Tecnologia HPLC

La tecnologia HPLC offre risultati estremamente precisi

Velocità

La modalità Fast

misura un campione in 24 secondi e

La modalità Variant

in 58 secondi

Flessibilità

Modalità di misurazione Fast ⇌ Variant
commutabili in modo continuo

I cromatogrammi ci danno 'intuizione'

Ridotta interferenza da parte delle Hbs modificate e varianti

HbS

HbC

HbA1c labile

Emoglobina modificata

(cianato di sodio, acetaldeide)

Facile da usare

Colore LCD

Rack multifunzione


Efficienza

Rotazione provette


Posizionamento automatico delle
provette con codice a barre
Miscelazione automatica del
campione



Rotazione provette

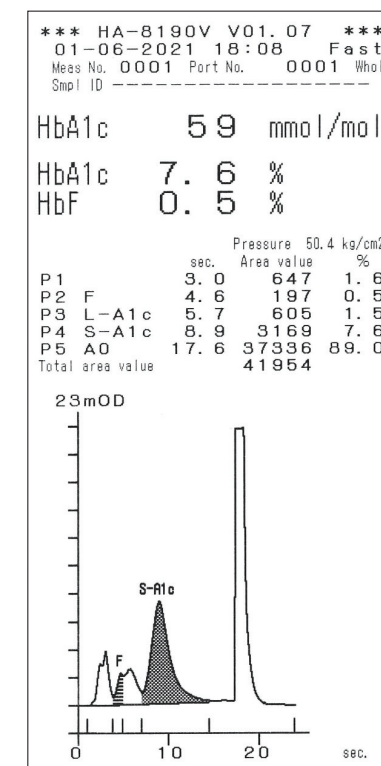

Modalità Fast

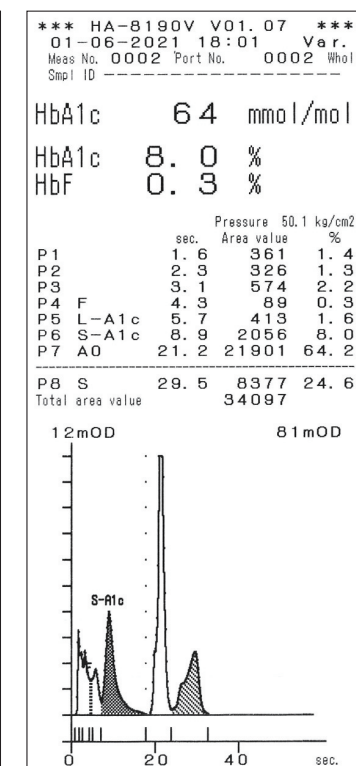

Modalità Variant

	HA-8180V (Modello precedente))	HA-8190V	Descrizione
Tempo di misurazione	Modalità Fast: 48 secondi Modalità Variant: 90 secondi	Modalità Fast: 24 secondi Modalità Variant: 58 secondi	24 secondi più rapido 32 secondi più rapido
Rilevamento Hb variante	HbS, HbC		Rilevamento varianti principali
Funzionalità	Sistema a doppia modalità Rotazione della provetta Anemia Rack	Sistema a doppia modalità Passaggio automatico da una modalità all'altra durante il funzionamento standard Rotazione della provetta Anemia Rack Facile lettura dei codici a barre Schermo touch panel Gestione operatore	Modalità di misurazione Miscelazione automatica del sangue Campioni con basso livello Hb Rotazione automatica della provetta per il rilevamento del codice a barre Funzionamento intuitivo Livelli di accesso multipli da parte dell'utente

Prodotto correlato



Esclusivo controllo di qualità HbA1c extendSURE CONTROL

I controlli, a due livelli, vengono forniti sotto forma liofila in fiale di vetro con tappi a vite.

Il volume finale di ciascun controllo è pari a 0.25 mL con una concentrazione di emoglobina totale di 14g/dL.

Tali controlli sono approvati dalla FDA e portano il marchio CE.

*I design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

Legal manufacturer

arkray factory, inc.

1480 Koji Konan-cho, Koka, Shiga-ken 520-3306, JAPAN

European representative

arkray europe, b.v.

Prof. J.H. Bavinklaan 2, 1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

<https://www.arkray.eu/english/>

arkray global business, inc.

Yousuien-nai, 59 Gansuin-cho, Kamigyo-ku,

Kyoto 602-0008, JAPAN

TEL +81-75-662-8979 FAX +81-75-431-1202