



Automatização
total através
de consolidação

Automated Urine Sediment Analyzer

AUTION EYE

AI-4510

Fully Automated Urine Analyzer

AUTION MAX

AX-4060

Escolha o modelo adequado ao seu estilo de vida!

GLUCOCARD **W**

GT-7210

Fácil de utilizar

Para quem procura simplicidade



Tamanho de amostra 0.5µL



Tempo de teste 7 segundos



GLUCOCARD **S**

GT-7110

Rápido e fácil

Para pessoas ativas que procuram uma utilização rápida e fácil



Tamanho de amostra 0.3µL



Tempo de teste 5 segundos



Escolha de tipo de embalagem



GLUCOCARD **S onyx**

GT-7120

Para qualquer situação!

Para quem procura múltiplas funções



Tamanho de amostra 0.3µL



Tempo de teste 5 segundos



Escolha de tipo de embalagem



Luz de tira de teste e retroiluminação para utilização no escuro



Função de comunicação sem fios com Bluetooth 4.0.

Funcionalidades

Equipado com botão de ejeção de tiras

Utilização segura sem contacto com sangue.



Gestão de dados simples utilizando comunicação USB

Gestão simples da glicemia.



Função de definição de Marcadores

Assistência para entender as medições.




antes das refeições



após as refeições

Precisão

Conformidade com EN ISO 15197:2015

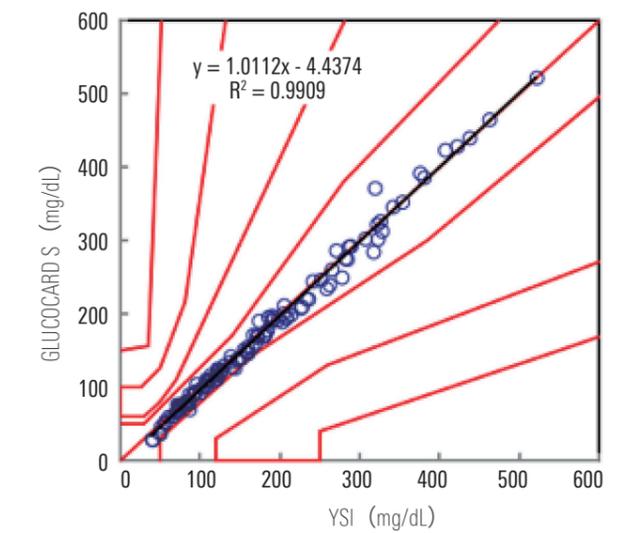

Função de correção de hematócrito (20-70%)

Tranquilidade para pacientes com policitemia ou anemia.

GLUCOCARD S Test Strips Escolha de tipo de embalagem!!




Coleção de imagens do atlas (valores de referência)

- O atlas inclui imagens pré-instaladas.
- O utilizador pode adicionar as suas próprias imagens a partir dos resultados de medição.
- O atlas é uma referência útil para ajudar na classificação manual



Ecrã de resumo

- As imagens do elemento formado são apresentadas como uma imagem microscópica (sintética).
- O elemento formado selecionado na lista é realçado.
- Clique com a roda do rato para selecionar uma imagem.

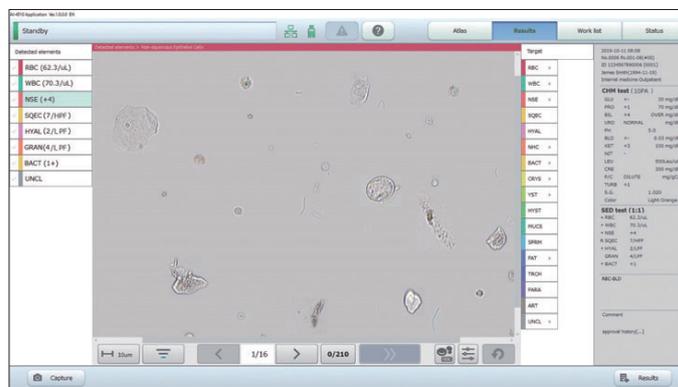

Itens reclassificados



Novo reagente

Uriflet S 11UA

As tiras Uriflet S 11UA podem ajudar na despistagem e no diagnóstico de nefropatia diabética ou CKD (doença renal crónica). A doença renal de fase inicial assintomática pode ser identificada com precisão através da medição simultânea de microalbumina/creatinina, o que permite um prognóstico bastante melhorado.

Nome das tiras de teste	Item de medição										Item calculado		
	GLU	PRO	BIL	URO	pH	BLD	KET	NIT	LEU	CRE	ALB	P/C	A/C
11UA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Analizador semiautomático de urinálise

Aution|Daten

AE-4070

- Design compacto : 206 (L)×365 (P)×180(A) mm/5.0 kg
- Produção elevada : 514 testes/hora (7 segundos/teste)
- Função de início automático :

A medição começa automaticamente quando é colocada uma tira no tabuleiro. Um ecrã de toque permite uma operação fácil e intuitiva.

O sucessor do Aution Eleven. Pode funcionar como reserva do AX-4060.

Legal manufacturer

ARKRAY FACTORY, INC.

1480 Koji Konan-cho, Koka, Shiga-ken 520-3306, JAPAN

European representative

ARKRAY EUROPE, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

<https://www.arkray.eu/english/>

ARKRAY GLOBAL BUSINESS, INC.

Yousuien-nai, 59 Gansuin-cho, Kamigyo-ku,

Kyoto 602-0008, JAPAN

TEL +81-75-662-8979 FAX +81-75-431-1202