

arkray

Medidor de glicemia

Alinhamento All-star da série GLUCOCARD

Elevada precisão e de fácil utilização

Medidor de glicemia

GLUCOCARD S


GT-7110



Medidor de glicemia

GLUCOCARD W

GT-7210

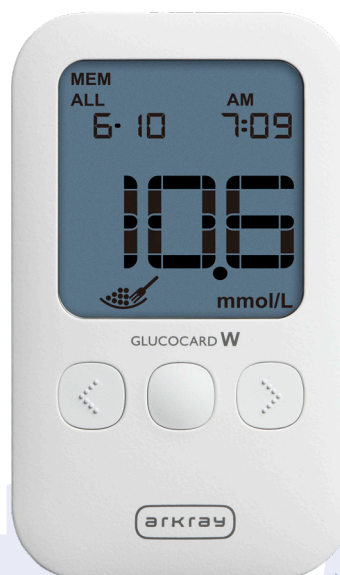

Medidor de glicemia

GLUCOCARD S onyx

GT-7120



arkray, inc.

Escolha o modelo adequado

Modelo básico

- ✓ Fácil de utilizar
- ✓ Para um número de resultados de teste pequeno a grande
- ✓ Gestão de dados a bordo ou opcional com o software MEQNET SMBG-Viewer

Medidor de glicemia

GLUCOCARD W

GT-7210



Tempo 7 s



Amostra
0,5 µL



Pilha
2000 testes



USB



Tipo de
recipiente

Modelo avançado

- ✓ Fácil e rápido
- ✓ Para um número de resultados de teste pequeno a grande
- ✓ Gestão de dados a bordo ou opcional com o software MEQNET SMBG-Viewer

Medidor de glicemia

GLUCOCARD S

GT-7110



Tempo 5 s



Amostra
0,3 µL



Pilha
2000 testes



USB



Tipo de
recipiente



Embalagem
individual

ao seu estilo de vida!

Modelo Premium

- ✓ Retroiluminação e luz de tira de teste
- ✓ Aplicação de glicemia WeCheck
- ✓ Para gestão de um grande número de testes

Medidor de glicemia

GLUCOCARD S onyx

GT-7120



Tempo 5 s



Amostra
0,3 µL



Pilha
1000 testes



USB



Bluetooth®
SMART



Tipo de
recipiente



Embalagem
individual

Funcionalidades úteis

Escolha de tipo de embalagem

Recipiente com 50 tiras de teste ou em embalagens individuais.



Precisão dos resultados


Conformidade com ISO 15197:2013.

Função de correção de hematócrito

Para maior precisão acima do intervalo hct completo (20-70%).

Alavanca de ejeção de tiras

A alavanca de ejeção da tira de teste permite uma eliminação das tiras de teste segura e sem contactos.

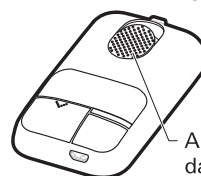

Alavanca de ejeção
da tira de teste

Função de definição de sinalizadores

Definição manual de sinalizadores, por exemplo, “antes da refeição”, “após a refeição”, para melhor compreensão dos resultados.



Deteção de hipoglicemia

Deteção de hipoglicemia - alerta “HYPO” quando o valor de glicemia é baixo.

HYPO

Autodeteção de controlo

O controlo da qualidade é detetado automaticamente e sinalizado em conformidade.

Especificações	Glucocard S	Glucocard S onyx
Item de teste	Nível de glicemia	Nível de glicemia
Tipo de amostra	Sangue total capilar fresco	Sangue total capilar fresco
Tamanho de amostra	0,3 µL	0,3 µL
Tiras de teste	GLUCOCARD S Test Strips	GLUCOCARD S Test Strips
Enzima	FAD-GDH	FAD-GDH
Unidades de medição	mg/dL ou mmol/L (sem possibilidade de trocar)	mg/dL ou mmol/L (sem possibilidade de trocar)
Intervalo de teste	10 - 600 mg/dL, 0,6 - 33,3 mmol/L	10 - 600 mg/dL, 0,6 - 33,3 mmol/L
Intervalo de hematócrito	20 - 70%	20 - 70%
Tempo de teste	5 segundos após a detecção de sangue	5 segundos após a detecção de sangue
Pilha	3 V: pilha de lítio (CR2032) x 1	3 V AAA 1,5 V x 2
Capacidade de memória	500 resultados de teste	500 resultados de teste
Função de comunicação	Micro USB	Micro USB e Bluetooth 4.0
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 8 - 40 °C (46 - 104 °F) Humidade: 20 - 80% de HR (sem condensação)	Temperatura: 8 - 40 °C (46 - 104 °F) Humidade: 20 - 80% de HR (sem condensação)
Dimensões	50 (L) x 17,6 (P) x 84 (A) mm	57 (L) x 18,5 (P) x 94 (A) mm
Peso	Aproximadamente 47 g com pilha	Aproximadamente 70 g com pilha

Especificações	Glucocard S	Glucocard S onyx
Item de teste	Nível de glicemia	Nível de glicemia
Tipo de amostra	Sangue total capilar fresco	Sangue total capilar fresco
Tamanho de amostra	0,3 µL	0,3 µL
Tiras de teste	GLUCOCARD S Test Strips	GLUCOCARD S Test Strips
Enzima	FAD-GDH	FAD-GDH
Unidades de medição	mg/dL ou mmol/L (sem possibilidade de trocar)	mg/dL ou mmol/L (sem possibilidade de trocar)
Intervalo de teste	10 - 600 mg/dL, 0,6 - 33,3 mmol/L	10 - 600 mg/dL, 0,6 - 33,3 mmol/L
Intervalo de hematócrito	20 - 70%	20 - 70%
Tempo de teste	5 segundos após a detecção de sangue	5 segundos após a detecção de sangue
Pilha	3 V: pilha de lítio (CR2032) x 1	3 V AAA 1,5 V x 2
Capacidade de memória	500 resultados de teste	500 resultados de teste
Função de comunicação	Micro USB	Micro USB e Bluetooth 4.0
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 8 - 40 °C (46 - 104 °F) Humidade: 20 - 80% de HR (sem condensação)	Temperatura: 8 - 40 °C (46 - 104 °F) Humidade: 20 - 80% de HR (sem condensação)
Dimensões	50 (L) x 17,6 (P) x 84 (A) mm	57 (L) x 18,5 (P) x 94 (A) mm
Peso	Aproximadamente 47 g com pilha	Aproximadamente 70 g com pilha

Especificações	Glucocard W
Item de teste	Nível de glicemia
Tipo de amostra	Sangue total capilar fresco
Tamanho de amostra	0,5 µL
Tiras de teste	GLUCOCARD W Test Strips
Enzima	GOD
Unidades de medição	mg/dL ou mmol/L (sem possibilidade de trocar)
Intervalo de teste	10 - 600 mg/dL, 0,6 - 33,3 mmol/L
Intervalo de hematócrito	20 - 70%
Tempo de teste	7 segundos após a detecção de sangue
Pilha	3 V: pilha de lítio (CR2032) x 1
Capacidade de memória	500 resultados de teste
Função de comunicação	Micro USB
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 8 - 40 °C (46 - 104 °F) Humidade: 20 - 80% de HR (sem condensação)
Dimensões	50 (L) x 17,6 (P) x 84 (A) mm
Peso	Aproximadamente 47 g com pilha

* Os designs e as especificações podem ser alterados sem aviso prévio.

Legal manufacturer

arkray factory, inc.

1480 Koji Konan-cho, Koka, Shiga-ken 20-3306, JAPAN

European representative

arkray europe, b.v.

Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

http://www.arkray.eu/english/